



步驟一

至 win10 工作排程器中建立基本工作精靈

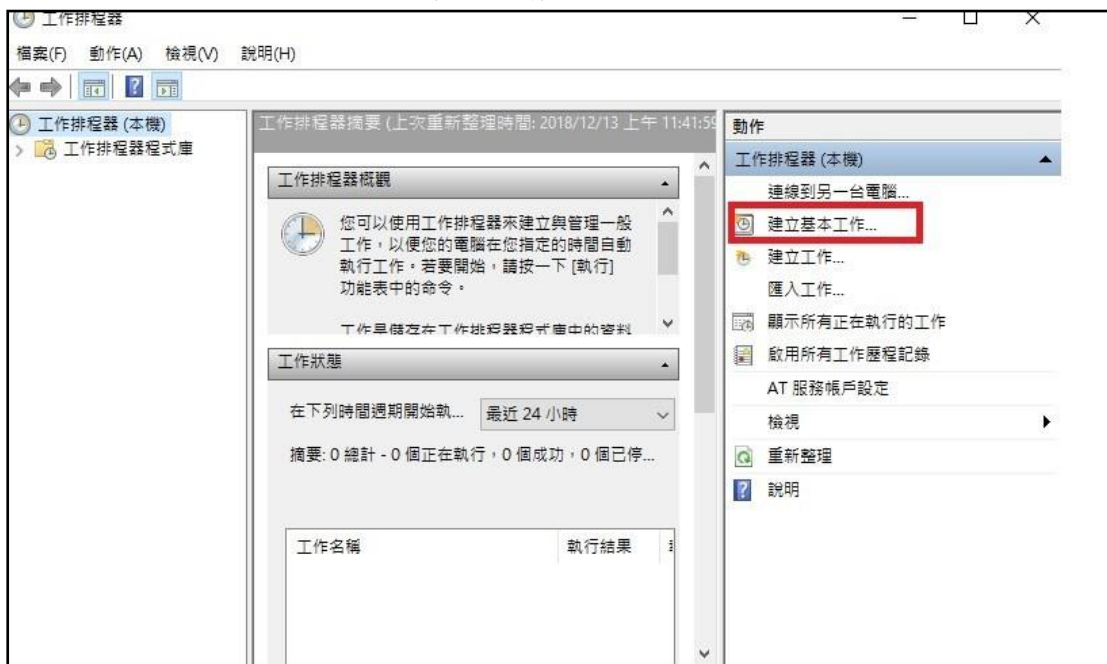

步驟二

輸入工作排程的名稱，可自行取名

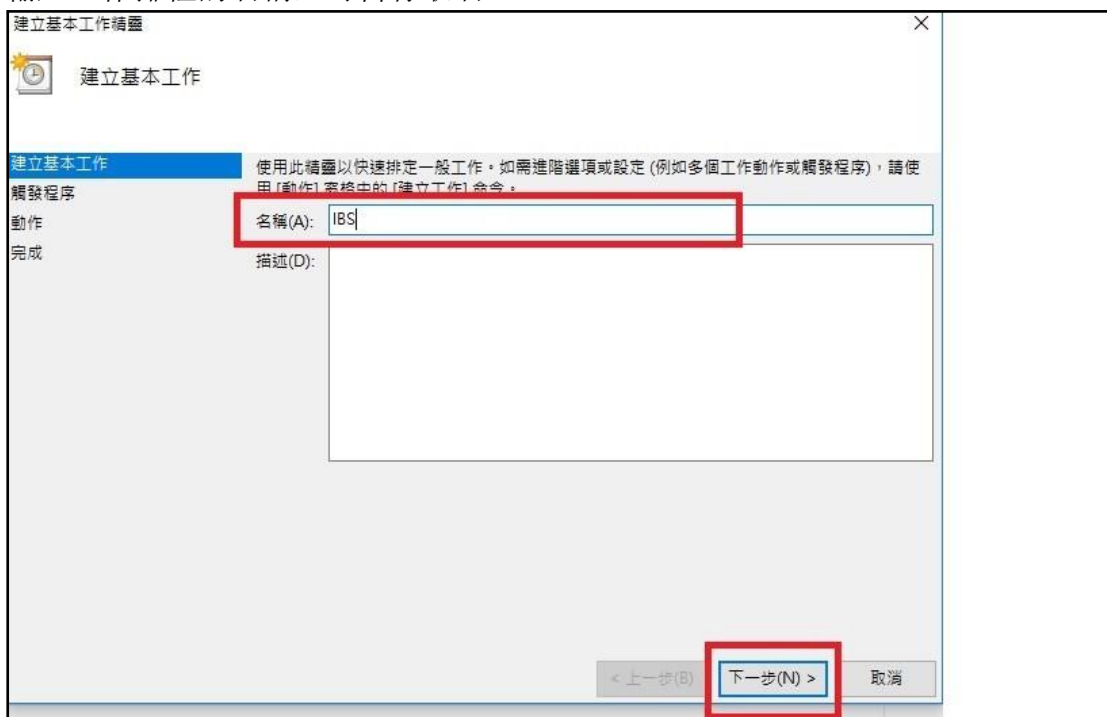


步驟三

選擇”在您登入時執行”




步驟四

選擇”啟動程式”

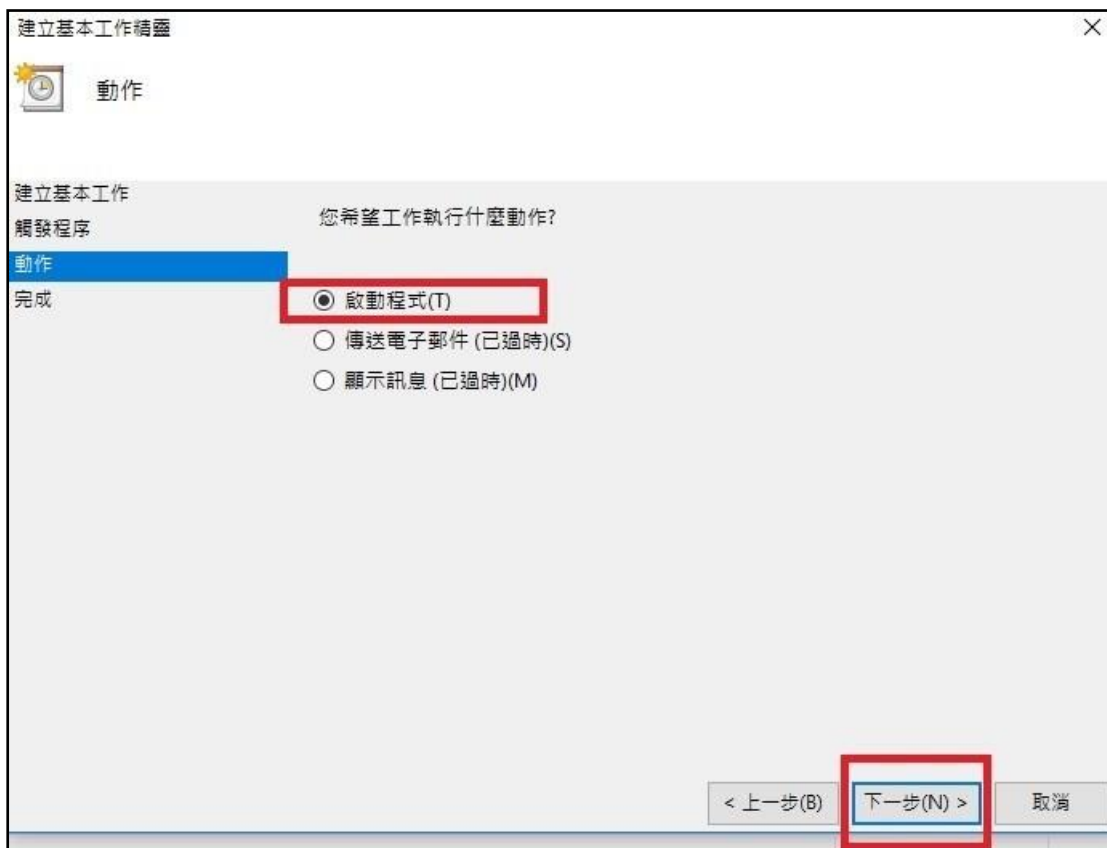


步驟五

選擇 IBS 軟體的捷徑

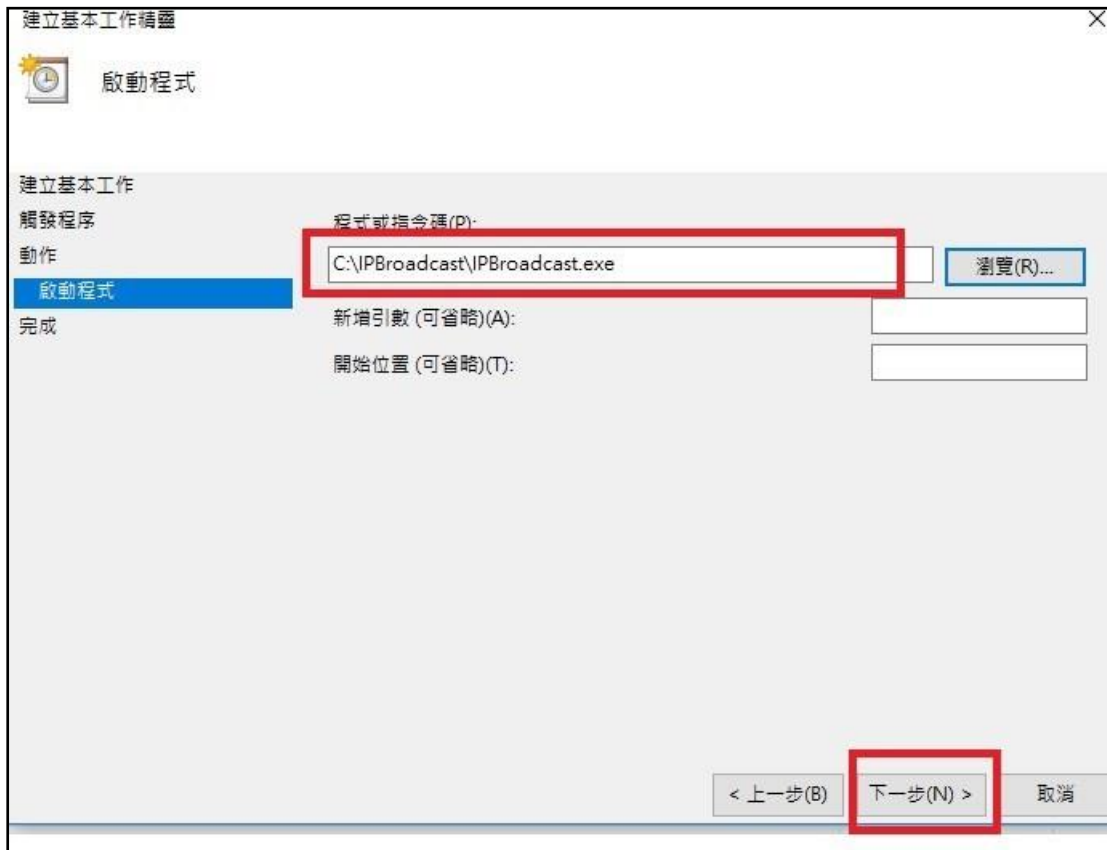


步驟六

按下"完成"

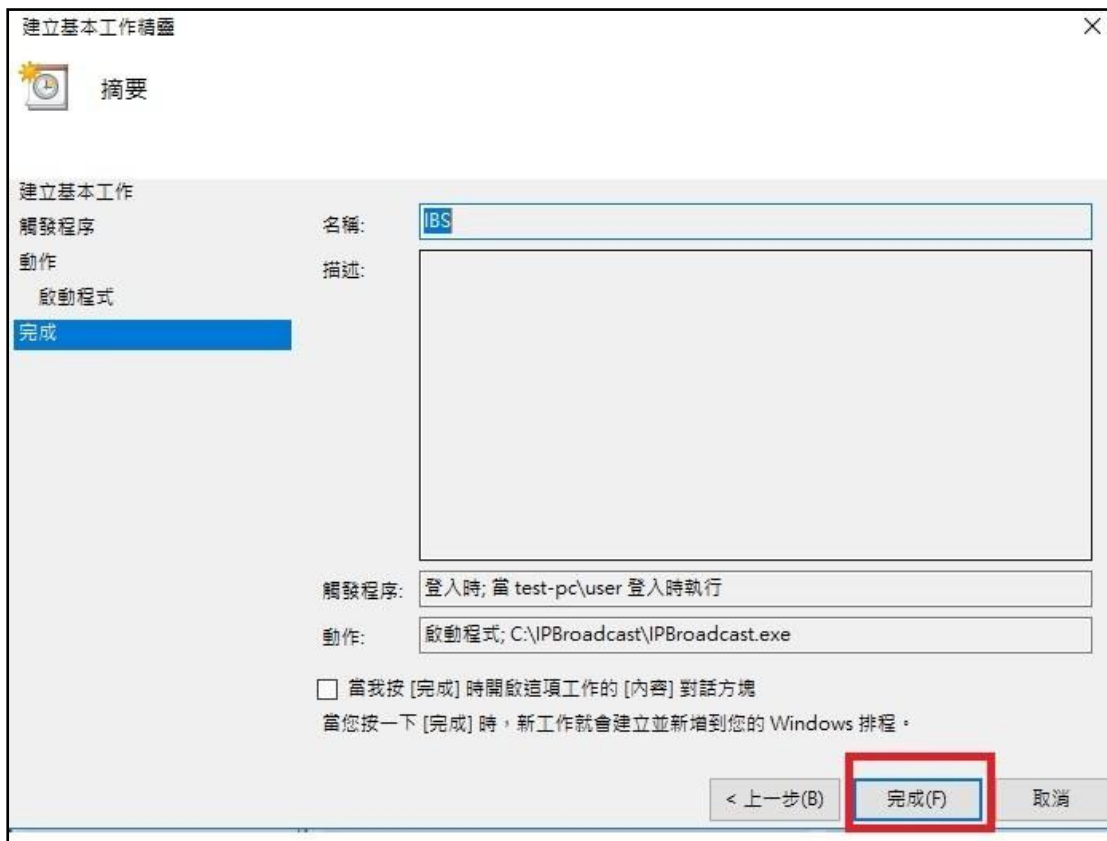


步驟七

於工作排程器程式庫中，選擇執行清單中剛所建立的排程，並按下滑鼠右鍵選擇”內容”

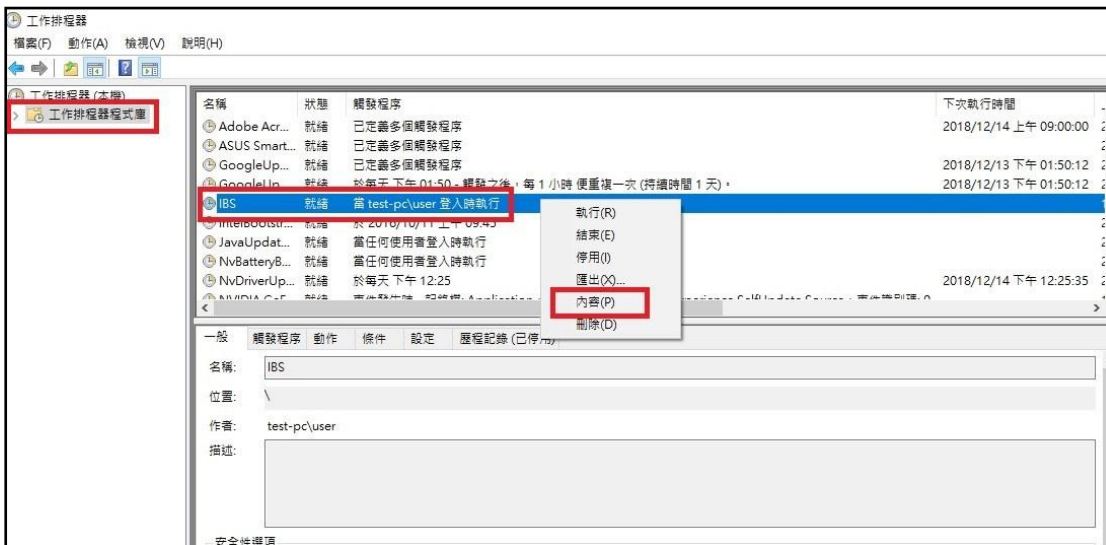

步驟八


務必取消”如果工作執行時間大於以下值即停止”的條件,以免作業系統會按時間自行關閉IBS軟體的執行

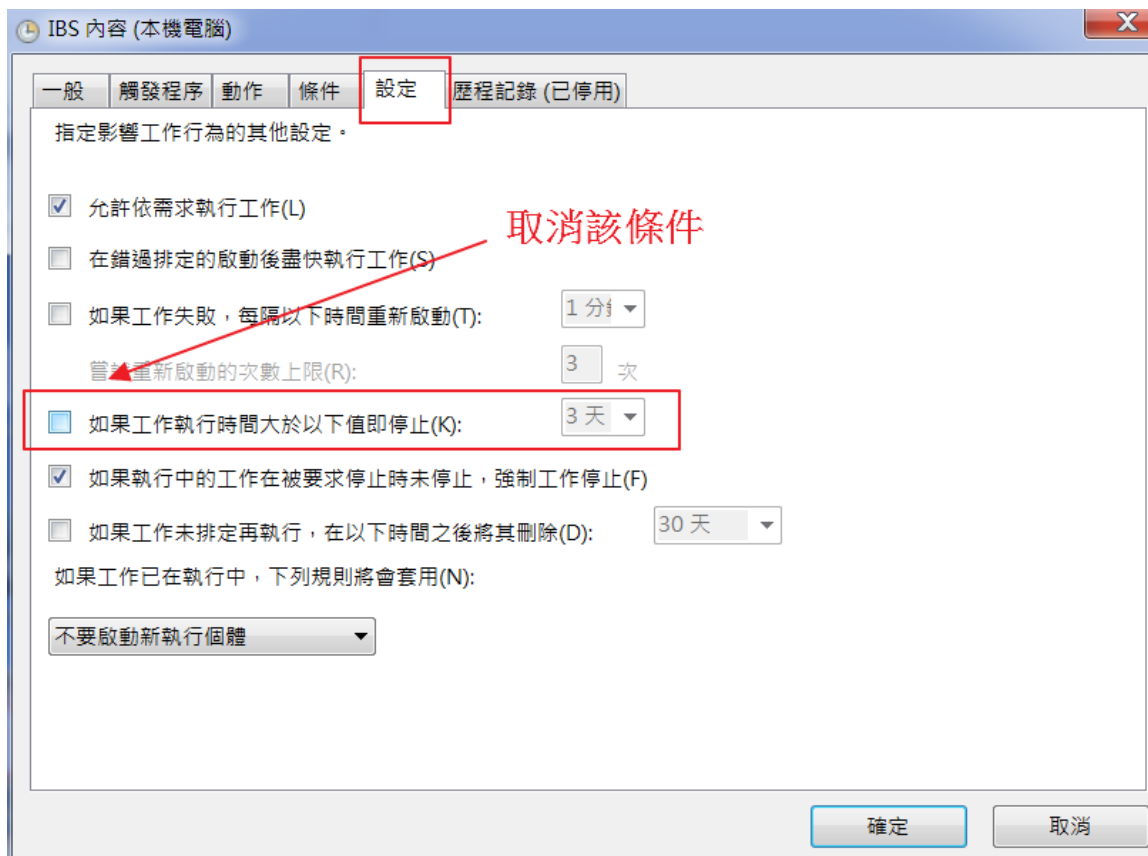

步驟九

勾選”以最高權限執行”,按下”確定”完成設定

請注意該使用者帳戶必須為系統管理員

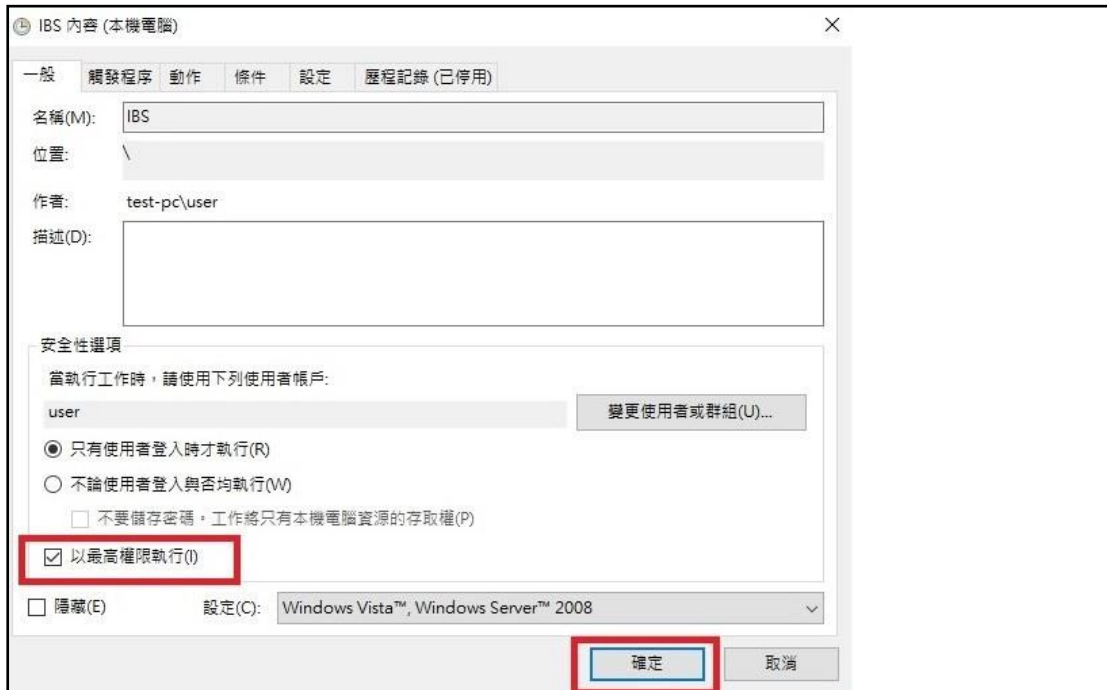

設定完成後重新開機即可完成開機自動啟動 IBS